

产品名称: 丹参酮

学名: Tanshinone I

CAS编号: 568-73-0

别名: 1,6-二甲基-菲并[1,2-b]呋喃-10,11-二酮; 1,6-Dimethyl-phenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione

分子式: C₁₈H₁₂O₃


分子量: 276.28608

纯度: ≥ 98%

品牌: pureonebio

规格: 10mg/20mg

详细信息:

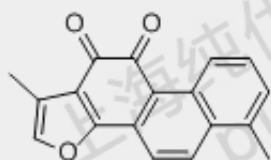

HPLC法测定丹参酮滴耳液中二氢丹参酮 隐丹参酮丹参酮 和丹参酮 A含量

目的 建立高效液相色谱法测定丹参酮滴耳液中二氢丹参酮 、隐丹参酮、丹参酮 和丹参酮 A含量的方法。方法 采用高效液相色谱法。流动相为乙腈 - 10 %乙腈 (52 : 48) ;流速 1.5ml/min ;检测波长 254nm。结果 二氢丹参酮 、隐丹参酮、丹参酮 和丹参酮 A的回归方程分别为 :Y = - 0 ...

HPLC同时测定丹参酮含片中二氢丹参酮 隐丹参酮 丹参酮 和丹参酮 A含量

目的建立 HPLC 同时测定丹参酮含片中二氢丹参酮 、隐丹参酮、丹参酮 和丹参酮 A含量的方法。方法色谱柱用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18, 4.6 × 150mm, 5Micron) . 流动相 : 乙腈水(55 : 45), 流速 : 1.0ml/min, 检测波长254nm。结...

HPLC同时测定丹参酮含片中二氢丹参酮 隐丹参酮丹参酮 和丹参酮 A含量

目的:建立 HPLC 同时测定丹参酮含片中二氢丹参酮 、隐丹参酮、丹参酮 和丹参酮 A含量的方法。方法:色谱柱用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(Agilent ZORBAX Eclipse XDB-C18, 4.6 × 150mm, 5Micron)。流动相:乙腈- 水(55:45), 流速:1.0ml/min, 检测波长254nm...

HPLC法测定丹参中丹参素、丹参酮 A、二氢丹参酮 、隐丹参酮的含量

目的 :建立丹参中水溶性成分和脂溶性成分同时定量的方法。方法 :高效液相色谱法 ,采用Shim packVP ODS(150mm × 4.6mm)C18色谱柱 ,以甲醇 - 0.5 %冰醋酸溶液梯度洗脱 ,检测波长为 281nm ,柱温为 35 ,流速为 0.8ml/min。结果 :丹参素、丹参酮 A、二氢...

HPLC法测定肾炎康复片中丹参酮 、隐丹参酮和丹参酮 A

目的肾炎康复片中丹参酮、隐丹参酮、丹参酮 A 进行测定。方法采用高效液相色谱法,Phenomenex C₁₈(18)色谱柱(250 mm × 4.6 mm,5 μ m);柱温:35 °C;流动相:乙腈-甲醇-水(50:25:25);体积流量:1.0 mL/min;检测波长:270 nm。结果丹参酮、隐丹参酮及丹参酮 A 的线性范围分别为...

康定鼠尾草根中隐丹参酮、丹参酮、丹参酮 A 含量测定

目的用高效液相色谱法测定青海玉树地区康定鼠尾草中丹参酮类成分含量,为资源利用提供依据。方法采用TLC和HPLC进行定性分析与定量分析。HPLC采用LiChrospher C₁₈(18)柱;甲醇:水(0.2% H₃PO₄)=70:30为流动相。检测波长为270nm,流速为1mL/min。结果隐丹参酮、丹参酮、丹参酮 A 呈...

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>